

Dette produkt er et dental håndstykke tilbehør, som transmissionsmedium (luft, vand, elektrisk og optisk) stik til højhastigheds luftturbine håndstykke og slangeforbindelser.

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug og arkiver til fremtidig reference.

! Advarsel:

- Læs denne vejledning før brug for at forstå produktfunktionerne og filen til fremtidig reference.
- Når du bruger produktet, skal du altid overveje patientens sikkerhed.
- Dette produkt tager ikke hensyn til patientens alder (undtagen spædbørn), køn, vægt eller nationalitet.
- Dette produkt tager ikke hensyn til operatørens alder (voksen), højde, vægt, køn eller nationalitet.
- Brugere er ansvarlige for driftskontrol, vedligeholdelse og løbende inspektion af dette produkt.
- Efterlad ingen indflydelse på produktet. Tab ikke produktet.
- Hvis produktet fungerer unormalt, skal du straks stoppe med at arbejde og kontakte forhandleren.
- Brug ikke syrerigt vand eller steriliserende opløsninger til at tørre, nedsænke eller rengøre produktet
- Hurtig kobling kan ikke termodes indikator og sterilisering.
- Produkterne leveres i ikke-steril tilstand og skal autoklaveres før brug.
- Udfør regelmæssige funktions- og vedligeholdelseskontroller.
- Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal du kontrollere, at det fungerer korrekt, før du bruger det på en patient
- For at undgå klinisk nedetid anbefales det, at der holdes en reserve til rådighed i tilfælde af sammenbrud under operationen.



1. Teknisk data

	229(M4)/ 229-1 (B2)	229b(M4)/ 229-1 b (B2)	229-F	229-K	229-GN	229 GW	229-GS	229-GK/ 229-GK1
Matchende produkter	QD-J(NSK)			KaVo MULTiflex 460E	PTL-CL-LED (NSK)	RQ-24 (W&H)	Sirona R/F	KaVa MULHfelx LUX465 LED
Monter modeller	Cx2Q7/ CX207-F	CX207-B/ CX207-C/ CX207-W	CX207-F (H25)	H36	CX207-G (N)	CX207-G (W)	CX207-G(8)	CX207-G (K1)
Pære	-	-	-	-	LYSDIODE	-	LYSDIODE	LYSDIODE
Vand adiustor	-	-	-	-	-	-	360° vandjustering	360° vandjustering
Spænding	-	-	-	-	-	2.9V-3.2V	2.9V-3.2V	2.9V-3.2V
Hul	2hul/ 4 hul	2hul/ 4 hul	2hul/ 4 hul	4 hul	6 hul	6 hul	6 hul	6 hul

2. Tilslutning og frakobling af håndstykket eller slangen

2-1. Tilslutningsmuligheder



- 1) Lynstikket indsættes i håndstykkets jackforbindelser, skubbes fremad klemme hurtigkobling;
- 2) Sæt håndstykket i hurtigstikket, mens du trækker låseringen på Quick Release-låseringen tilbage.
- 3) Sørg for, at håndstykket er korrekt tilsluttet hurtigstikket.
- 4) Sæt hurtigstikket korrekt i slangestikket, og stram slangemøtrikken (fig.).
- 5) Sørg for, at hurtigstikket er korrekt tilsluttet slangen.

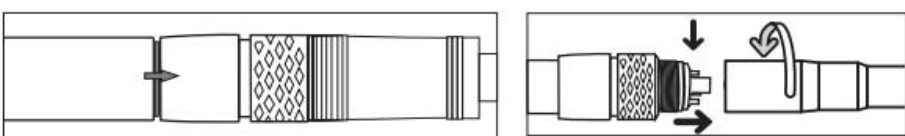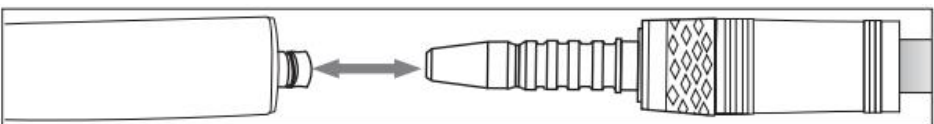

- ! **OBS: hurtigkoblingskontakt med skruenøgle og slangetilslutning, Stram slangemøtrikkerne, brug en skruenøglepatron hurtigkobling.**

2-2. Afbrydelse

- 1) Træk låseringen tilbage, og fjern håndstykket fra koblingen. (Fig.)
- 2) Skru hurtigkoblingsmøtrikken af, fjern hurtigstikket fra slangen.

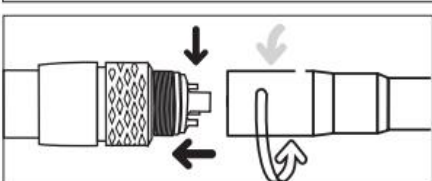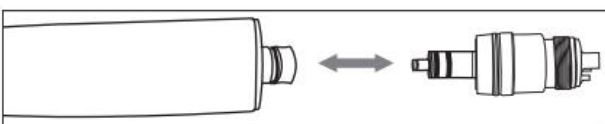

! Advarsel:

- 1) Må ikke i betjeningsproceduren for indlæsning fjern højhastighedshåndstykket
- 2) Link hurtigt link i henhold til model af håndstykke!
- 3) Skal være godt forbundet til brug!

3. Vandjustering (delvise modeller gælder)

- 1) med uret for at reducere vand;
- 2) mod uret for at øge vandet.




4. Udskiftning af o-ringe og ikke-tilbagetrækningsventil

4-1. Udskiftning af o-ringe

Slidt eller beskadiget O-ring kan få luft eller vand til at lække.


Når der registreres vand i udblæsningsluften, eller der lækker vand fra det tilsluttede punkt, udskiftes O-ringen.

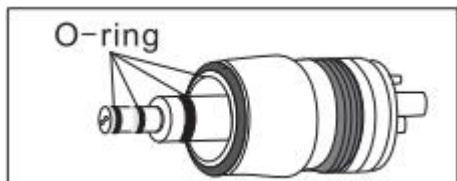

4-2. Udskiftning af ikke-tilbagetrækningsventil (udvalgte modeller gælder)

For at forhindre orale væsker trukket ind i vandledningen har hurtig afbrydelse ikke-tilbagetrækningsventil, Hvis vand begynder at lække fra håndstykket, skal du udskifte ikke-tilbagetrækningsventilen.

- 1) Fjern back-end-pakningen.
- 2) Udskift ikke-tilbagetrækningsventil

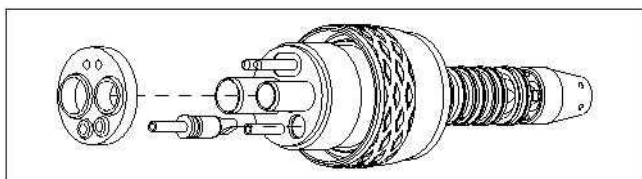


5. Udskiftning af pære (udvalgte modeller gælder)

- 1) Afbryd forbindelsen til Quick Link
- 2) Skru hætten af. Fjern den udbrændte pære.
- 3) Udskift med en ny. Sørg for, at stifterne har god kontakt med metalstrimlerne.
- 4) I tilfælde af dårlig kontakt skal du hæve stifterne (også med små, skarpe), før du tilslutter.
- 5) Brug nøglen til at fjerne den gamle LED-pære, udskift den nye LED-pære.


⚠ FORSIGTIG:

Udskiftning af LED-lys,


LED lyser ikke, drej 180 ° rotationsinstallationen igen.

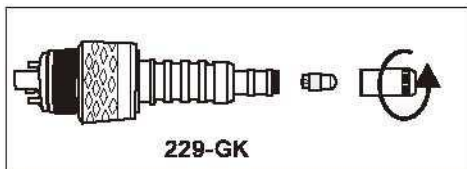

229-GK

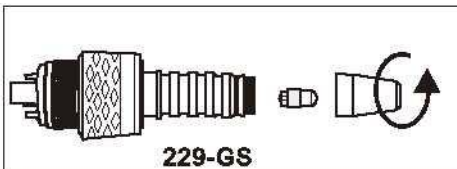


229-GS

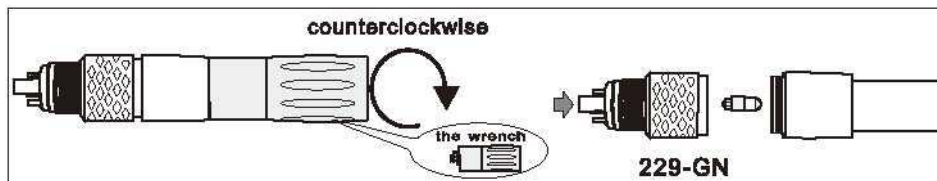

229-GN

6. Smøring

- 1) Hold hurtigstikket, juster dyseindløbsåbningen efter at have trykket på injektionen; når sprøjtetanken skal stige opad;
- 2) Injektion på ca. 1-2 sekunder

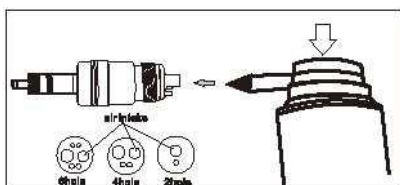

7. Rengøring og desinfektion

- 1) Rengør og desinficer hurtigstikket umiddelbart efter hver behandling;
- 2) Skyl og børst af under demineraliseret vand (<38 ° C);
- 3) Fjern eventuelle flydende rester (absorberende klud, føntør med trykluft)
- 4) Brug ikke vand med højt syreindhold eller steriliseringsopløsninger til at tørre, nedsænke eller rengøre;
- 5) Lynstikket er ikke godkendt til desinfektion og sterilisering af termiske vaskemaskiner.

⚠ Advarsel:

Anbring ikke hurtigstikket i flydende desinfektionsmiddel eller i et ultralydbad!

Lynstikket er ikke godkendt til sterilisering!

Lynstikket kan holdes på slangen!

8. Transport og opbevaring

Opbevaringstemperatur: -40°C + 70°C

Driftstemperatur: +10°C +35°C

Relativ luftfugtighed: 8% relativ luftfugtighed – 80% relativ luftfugtighed

Luftryk: 86kPa-106kPa

VÆRD: 1,0

REV: 2016-9