


3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Impregum™ Super Quick
Polyether Impression Material

**Går det att få
med alla
detaljer på 2
minuter?
Ja, det gör det.**

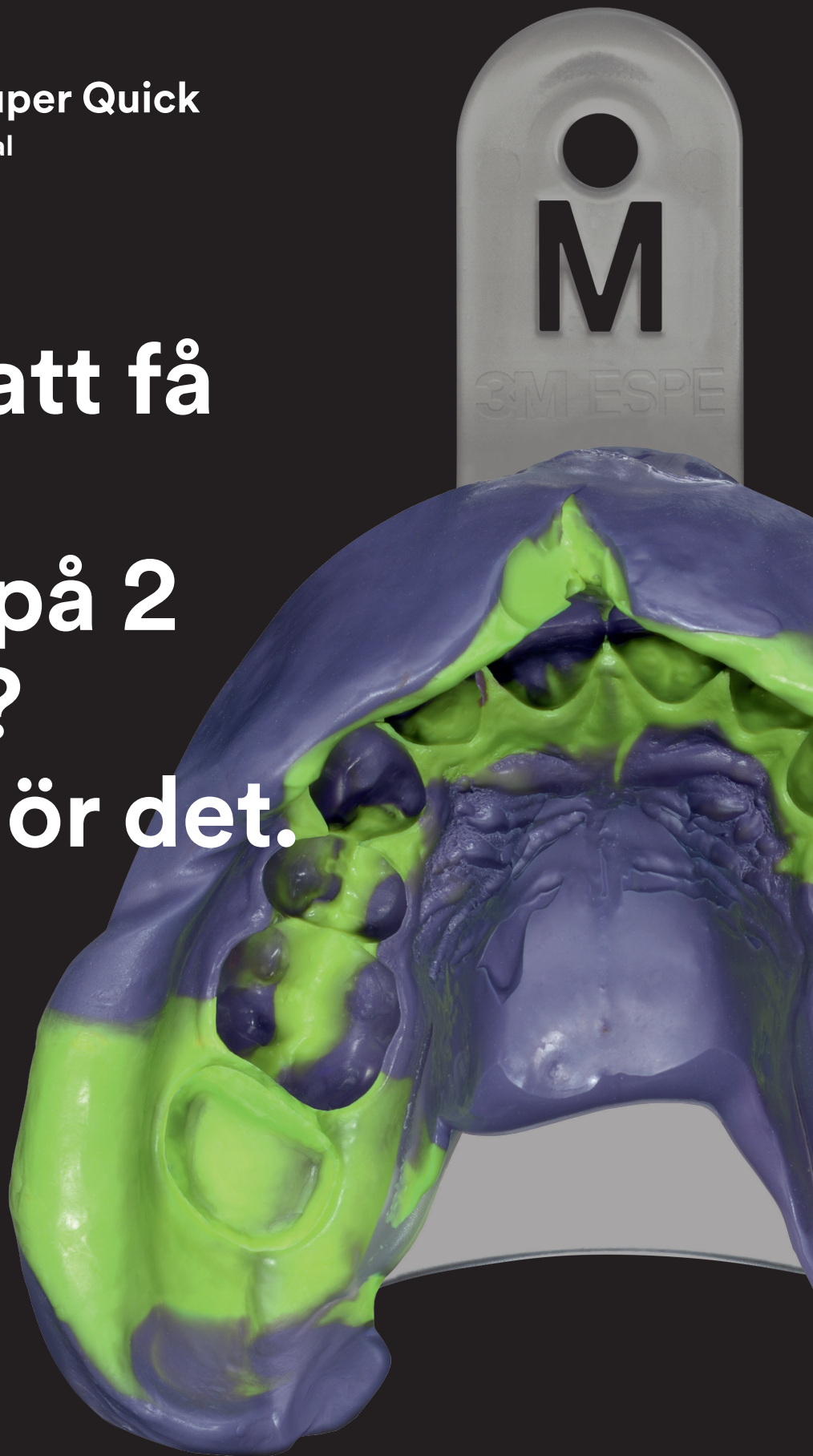


Snabbaste vägen till exakt precision för små indikationer

3M™ Impregum™ Super Quick

Impregum polyetrar har alltid varit känt för att ge optimala avtryck vid implantat och andra komplexa situationer. Visst skulle det vara bra att kunna få samma exakta avtryck även till singelkronor? Vi har nu gjort det till verklighet genom att utveckla vårt nya Impregum Super Quick polyetermaterial.

Impregum Super Quick kombinerar den exakthet och pålitlighet som en polyeter ger med snabbheten från en Asilikon. Djupa marginaler och fuktig omgivning spelar inte längre någon roll.

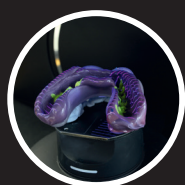

Snabbare stelningstid

Så snabbt, så bra: Med bara 2 minuters stelningstid får du ett snabbare avtryck med nya Impregum Super Quick till mindre konstruktioner såsom singelkronor, små 3-leds broar, implantat samt inlägg/onlays.

100% Polyeter - exakt precision

Liksom alla polyetrar så har Impregum Super Quick materialen visat en utmärkt prestanda även i fuktig miljö och med goda flytegenskaper. Detta leder till en hög nivå av tillförlitlighet och detaljåtergivning för precisionsavtryck.

Det är speciellt viktigt att du vet hela arbetstiden för ditt avtrycksmaterial. Eftersom det är en polyeter, så har du 45 sekunders arbetstid med Impregum Super Quick. Använd den tid du behöver. Du kan använda den avsatta arbetstiden fullt ut - ingen stelning innan arbetstidens slut. Så fort som arbetstiden är över, startar stelningsfasen. Till skillnad mot vissa VPS material. Detta garanterar till en bättre detaljåtergivning och färre förvrängningar.

Låt dina patienter känna sig komfortabla

Den fräscha mintsmaken tillsammans med den korta tid som krävs för avtrycket att stelna, förbättrar patientens komfort avsevärt.

Polyetern passar in i CAD/CAM flödet.

Impregum Super Quick går att scanna, med det vanligaste förekommande scanners på marknaden, vilket ger ett effektivt samarbete med ditt tandtekniska lab.


Exakt polyeter avtrykningar. Med 3M Super Quick.



Snabb och måttlig fuktkontroll och retraktion av gingival mjukvävnad med 3M™ Astringent Retraction paste.




Enkel och exakt applicering av 3M™ Impregum Super Quick lightbody polyetermaterial med 3M™ Intraoral spruta (lila).

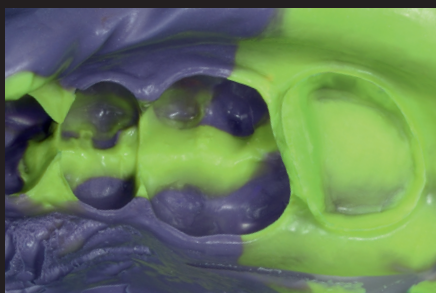

Luftblåsfritt avtryck med kontrasterande färg för exakt detaljåtergivning.

Enstegs avtryck med 3M™ Impregum Super Quick polyetermaterial (Medium och lightbody) i en engångssked 3M™ Impression tray.

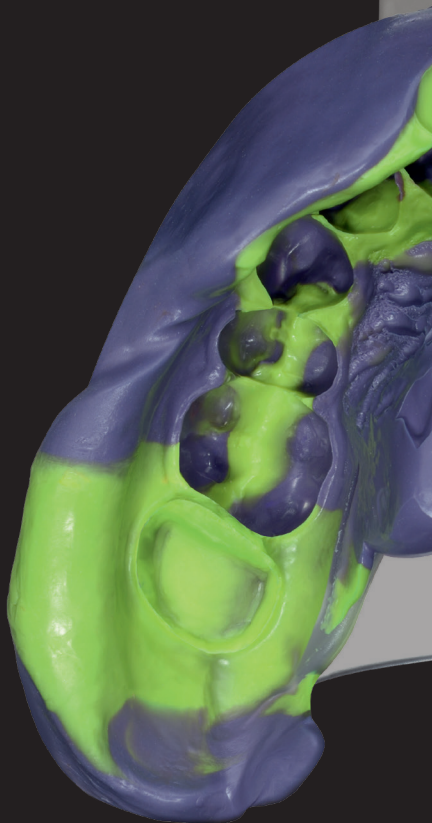

HÖG TILLFREDS- STÄLLELSE

En klinisk utvärdering visar en mycket hög tillfredsställelse vad gäller precision med 3M™ Super Quick avtrycksmaterial och exakt passform av krona eller bro.



95%



Källa: 3M field evaluation with 447 participants from Europe and the US, 2017

3M™ Impregum™ Super Quick

- Första supersnabba polyetern med 45 sek. arbetstid och snabb stelningstid, 2 minuter
- Tillgänglig i medium och lightbody konsistens
- För monofas och enstegs avtrycks teknik
- Perfekt för avtryck av singelkronor, små 3-ledsbroar, implantat och inlägg/onlays

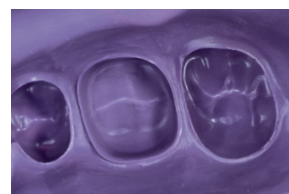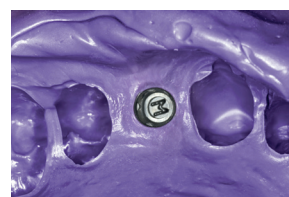



	Blandningsmaskine	Avtryckstekniker	Singelkronor	Små implantat (≤ 2 led)	Inlägg/onlay (≤ 2 led)	Små broar (≤ 3 led)	Rekommenderad max arbetstid (min:sek)	Intraoral stelningstid vid 37 grader C (min:sek)
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		Monofas 1-steg	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1-steg	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

Beställningsinformation



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body introduktionsförpackning (69383)



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body introduktionsförpackning (69381)

Artikelnummer Produktinformation

NEW

Introduktionsförpackning för 3M™ Pentamix™ 3 Automatisk blandningsmaskin

69383

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body
1 bas pasta MB – 300 ml, 1 katalysator MB – 60 ml, 13M™ Penta™ materialbehållare MB, 10 M™ Penta™ blandningsskruvar – Röd, 1 M™ Penta™ Elastomerspruta, 1 Polyeteradhesiv – 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste kapslar

NEW

69381

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body
1 bas pasta MB – 300 ml, 1 katalysator MB – 60 ml, 2 patroner LB – 50 ml /unit, 13M™ Penta™ materialbehållare MB, 10 3M™ Penta™ blandningsskruvar – Röd, 5 3M™ Intraorala sprutor lila, 5 3M™ Garant™ blandningsskruvar lila, 5 3M™ Garant™ Intraorala spetsar vit, 1 Polyeteradhesiv – 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste kapslar, 6 3M™ Impression Trays

NEW

Refills

NEW

69385

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill
2 bas pastor - 300 ml /st, 2 katalysatorer - 60 ml /st

69379

3M™ Impregum™ Super Quick Light Body
4 patroner – 50 ml /st, 5 3M™ Intraorala sprutor, lila, 5 3M™ Garant™ blandningsskruvar lila

Blandningsmaskiner & Tillbehör

77871

3M™ Pentamix™ 3 automatisk blandningsmaskin

NEW

77903

3M™ Pentamix™ Lite automatisk blandningsmaskin – 230 V 50 Hz INT
inkl. 13M™ Penta™ materialbehållare

77906

3M™ Pentamix™ Lite automatisk blandningsmaskin – 230 V 50 Hz CH
inkl. 13M™ Penta™ materialbehållare

69387

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium materialbehållare

77944

13M™ Penta™ materialbehållare 3M™ Pentamix™ Lite blandningsmaskin

71507

3M™ Intraoral spruta lila, 20 st

71508

3M™ Intraoral spruta lila, 50 st

77580

1 Garant™ dispenser 1:1/2:1

NEW

77601

Väggfäste- kit 3M™ Pentamix™ 3 blandningsmaskin

30600

1 flaske Polyeter skedadhesiv á 17 ml

77949

3M™ Penta™ blandningsskruvar – Röd, 50 st

71454

3M™ Garant™ blandningsskruvar lila, 50 st

71461N

3M™ Garant™ Intraoral spetsar vita, 50 st



3M Norge A/S
3M Oral Care
Postboks 300, 2001 Lillestrøm
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tel: 0 63 84
www.3M.no/dental

3M.com/Dental

3M, Garant, Impregum, Penta och Pentamix är varumärken från 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Används under licens i Canada. Alla andra varumärken ägs av andra företag. © 3M 2018. All rights reserved. PB611271-1SE180322